


2017-01-04

Arabiska

 Patientanvisning för klamydiaundersökning,
 vaginalsekret i urin

عيادة علم الأحياء

تعليمات للمرضى بشأن فحص الكلاميديا الإفرازات المهبليّة في البول

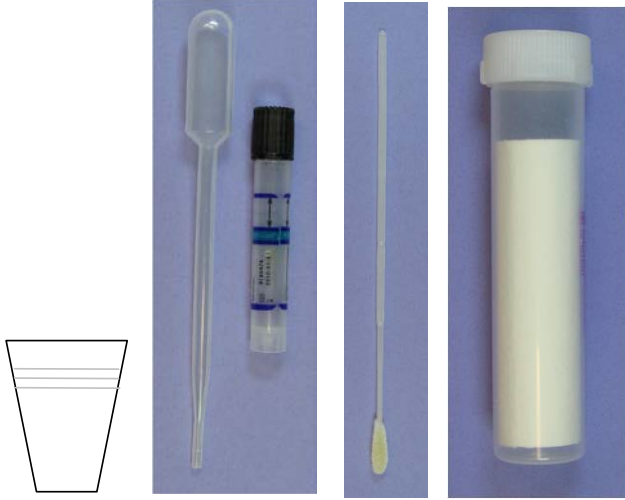

كوب بلاستيكي

طقم فحص
الكلاميديا
للبول

عصا العينة

علبة النقل

يتطلب ما يلي قبل أخذ العينات

- مذكرة إحالة طبية
- كوب بلاستيكي
- طقم فحص الكلاميديا للبول، مع أنبوب وماصة
- عصا العينة
- علبة النقل
- إذا كان سيتم إرسال العينة بالبريد فيطلب:
مظروف للإرسال مكتوب عليه العنوان مع دفع رسم البريد

أخذ العينات

يُفضل أن تؤخذ العينة في الصباح أو بعد ساعتين بحد أدنى من آخر تبول.

1. قومي بتعليم الأنبوب وعلبة النقل عن طريق كتابة الاسم والرقم الشخصي أو بملصق مكتوب عليه الرقم المذكور في مذكرة الإحالة الطبية.
2. تبولي في كوب بلاستيكي لحوالي 2 سم، ومن المهم أن تكون هذه الكمية هي أول بول عند بدء التبول.
3. حافظي على الأنبوب بوضع مستقيم واطرفي عليها برفق على سطح مستو لإزالة أي قطرات قد تكون موجودة في الغطاء.
4. فكي غطاء الأنبوب. قومي بمص البول من الكوب البلاستيكي باستخدام الماصة واملأ الأنبوب حتى تصل كمية البول بين العلامات الموجودة عند الأسهم السوداء.
5. قومي بوضع عصا العينة في المهبل لبضعة سنتيمترات ونفي العصا بضعة لفات على طول جدار المهبل.
6. لفي العصا بشدة داخل الأنبوب الذي فيه عينة البول ثم اعصري السائل. وارمي العصا. قومي بلف الغطاء وغلق الأنبوب جيداً وامتزجي العينة عن طريق رجها 3 - 4 مرات.
7. قم بوضع الأنبوب داخل علبة النقل.
8. يُرجى تسليم العينة في أقرب وقت ممكن، في أقرب مختبر للرعاية الصحية.
9. إذا كان سيتم إرسال العينة بالبريد. قم بوضع العينة ومذكرة الإحالة الطبية داخل مظروف الإرسال ثم قم بوضعه داخل صندوق البريد أو بأحد مكاتب البريد.