


2015-04-27

Serbiska
Patientanvisning för klamydia-
undersökning, vaginalsekret i urin

Uputstvo pacijentu pri davanju uzorka za klamidiju, vaginalni sekret i mokraća

Pre uzimanja uzorka potrebno je imati

- Uput
- Plastičnu čašu
- Klamidija set za mokraću, sa epruvetom i pipetom
- Štapić
- Transportnu kutiju
- Ako se uzorak šalje poštom potrebno je imati kovertu sa adresom i plaćenom poštanskom dostavom

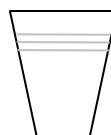

Plastična čaša



Klamidija set
za mokraću



Štapić



Transportna
kutija

Uzimanje uzorka

Uzorak se uzima pri prvom jutarnjem mokrenju ili najranije dva sata posle poslednjeg mokrenja.

1. Obeležiti epruvetu i kutiju za transport imenom i ličnim brojem (personnummer), ili etiketom sa brojem skinutim sa uputa.
2. Pomokriti se u plastičnu čašu (otprilike 2 cm). Najvažnije je dobiti prvi mlaz mokraće.
3. Uzeti epruvetu, držati je uspravno, pa kucnuti njome pažljivo po ravnoj površini. Cilj je osloboditi se kapljica nakupljenih u poklopcu.
4. Skinuti poklopac sa epruvete. Usisati mokraću pipetom pa napuniti epruvetu tako da nivo mokraće bude između dve crte obeležene crnim strelicama.
5. Uvući štapić nekoliko centimetara u vaginu i zavrteti ga nekoliko puta da zahvati zidove vagine.
6. Staviti štapić u epruvetu sa mokraćom i njime dobro promešati kako bi se skinuo sadržaj nakupljen na štapiću. Baciti štapić. Dobro zatvoriti epruvetu pa promešati tako što će se epruveta okrenuti gore-dole, 3-4 puta.
7. Staviti epruvetu u transportnu kutiju.
8. Ostaviti uzorak što je pre moguće u najbližoj laboratoriji.
9. Ako se uzorak šalje poštom:
Staviti uzorak i uput u kovertu i spustiti kovertu u poštansko sanduče ili predati kovertu u najbližem poštanskom predstavništvu.