

2016-05-30

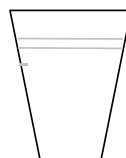
Spanska

Patientanvisning för klamydiaundersökning,  
vaginalsekret i urin

## Instruccion al paciente para muestras para test de clamidia, secreción vaginal en orina

### Para la toma de muestra necesita:

- Orden médica
- Vaso plástico
- Kit de orina para clamidia, con tubo y pipeta
- Varilla para test
- Frasco para transporte
- Si la muestra es enviada por correo, necesitará: sobre especial para transporte de muestras con dirección y franqueo.

Vaso  
plásticoKit de orina  
para clamidiaVarilla para  
testFrasco para  
transporte

### Toma de muestra

*Tome la muestra de preferencia en la mañana o dos horas después de la última orina.*

1. Marque el tubo y el frasco para transporte con su nombre y su número de identidad o con la etiqueta numerada de la orden médica.
2. Orine aproximadamente 2 cm en el vaso plástico, es importante incluir las *primeras* gotas de orina.
3. Mantenga el tubo derecho y golpee despacio sobre una superficie plana para eliminar gotas en la tapa rosca.
4. Desenrosque la tapa del tubo. Recoja orina con la pipeta y llene el tubo hasta que el nivel de orina se ubique entre las barras con flechas negras.
5. Introduzca la varilla dentro de la vagina unos centímetros y dele unas vueltas bordeando las paredes de la vagina.
6. Gire o bata la varilla con fuerza en el tubo con la muestra de orina y exprima el líquido. Deseche la varilla. Enrosque bien la tapa y mezcle la muestra girando el tubo 3 o 4 veces.
7. Deposite la probeta en el frasco para transporte.
8. Entregue la muestra cuanto antes en un laboratorio municipal y/o provincial cercano.
9. En caso de enviar la muestra por correo:  
Coloque la muestra y la remisión en el sobre para transporte y deposite el sobre en un buzón o entréguelo en una oficina de correos.